

บริการสั่งตัด "ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล" และ "Pressure Garment"

คู่มือการวัดขนาดสินค้า

ถุงเท้ากระชับ สวมใส่หลังการรักษาแผล Burn เพื่อลดรอยกระชับแผลเป็นนูน



บริการสั่งตัดสินค้าขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

Wacoal Body Clinic เราเข้าใจถึงสรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่สินค้าสำเร็จรูปได้ เรามีบริการสั่งตัดแบบพิเศษ ให้ขนาดไซส์สินค้าเข้ากับสรีระของคุณโดยเฉพาะ เราจะวัดขนาดรูปร่างของคุณ และสร้างแพทเทิร์นใหม่ เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระของคุณมากที่สุด

* ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ขั้นตอนการรับบริการ



คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line

@bodyclinic



วัดตัวตามคู่มือ

กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม




สร้างแพทเทิร์น




ผลิตสินค้า

ตำแหน่งจุดวัดทั้งหมด

ข้อแนะนำ วิธีการใช้สายวัด ควรวางสายวัด
อยู่ระดับแนวตรงแนบกับสรีระ ไม่เอียงหรือเฉียง
และ ปรับสายวัดให้แนบพอดีกับสรีระ ไม่รัดแน่น
หรือหลวมเกินไป

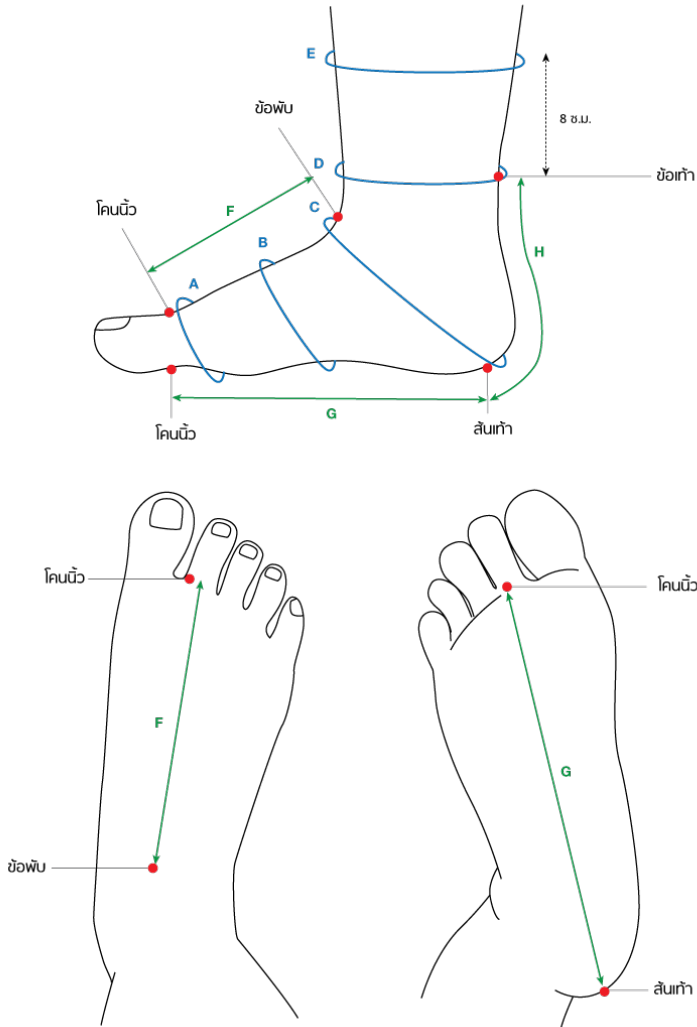

วัดตัวตามจุด **A - H** (หน่วยเป็น ซม.)



ศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic บริษัท ไทยวอล จำกัด (มหาชน)
132 ซ.ศรีนครินทร์ รังสิต 7 แขวงบางน้ำผึ้ง เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2693 9494, 0 2293 3199 ต่อ 418 Line: @bodyclinic

แบบฟอร์มการสั่งตัดสินค้า WACOAL BODY CLINIC

โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคล / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

ชื่อ..... นามสกุล..... เพศ ชาย หญิง อายุ.....ปี
บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย..... อาคาร/หมู่บ้าน.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ / มือถือ

ข้อมูลการสั่งตัดสินค้า (สั่งขั้นต่ำ 3 ตัว)

สี/สีสินค้า..... สี NN (เนื้อ) จำนวน.....ตัว
 สี BL (ดำ) จำนวน.....ตัว

รูปแบบสินค้า

<input type="checkbox"/> ทางเทงกระชับ	<input type="checkbox"/> แฟนกระชับคอ
<input type="checkbox"/> กุขเท้ากระชับ	<input type="checkbox"/> เลือกระชับ
<input type="checkbox"/> กุขมือกระชับ	<input type="checkbox"/> หน้ากากกระชับ
<input type="checkbox"/> ที่รัดแขน	<input type="checkbox"/> อื่นๆระบุ.....

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "คู่มือการสั่งตัดสินค้า" จากนั้น วัดตัวตามจุดที่กำหนด และกรอก
ข้อมูลตัวเลขจุดวัดในตำแหน่งต่าง ๆ ลงแบบฟอร์ม


Aซ.ม.	Kซ.ม.	Uซ.ม.	AEซ.ม.	AOซ.ม.
Bซ.ม.	Lซ.ม.	Vซ.ม.	AFซ.ม.	APซ.ม.
Cซ.ม.	Mซ.ม.	Wซ.ม.	AGซ.ม.	AQซ.ม.
Dซ.ม.	Nซ.ม.	Xซ.ม.	AHซ.ม.	ARซ.ม.
Eซ.ม.	Oซ.ม.	Yซ.ม.	AIซ.ม.	ASซ.ม.
Fซ.ม.	Pซ.ม.	Zซ.ม.	AJซ.ม.	ATซ.ม.
Gซ.ม.	Qซ.ม.	AAซ.ม.	AKซ.ม.	AUซ.ม.
Hซ.ม.	Rซ.ม.	ABซ.ม.	ALซ.ม.	AVซ.ม.
Iซ.ม.	Sซ.ม.	ACซ.ม.	AMซ.ม.	AWซ.ม.
Jซ.ม.	Tซ.ม.	ADซ.ม.	ANซ.ม.	AXซ.ม.

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่..... ผู้รับเรื่อง..... หมายเลขดู.....

กรอกข้อมูลจุดวัดทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม
เลือกเมนู **File** และเลือก **Save** เพื่อบันทึกข้อมูล

จุดวัดตำแหน่ง


A

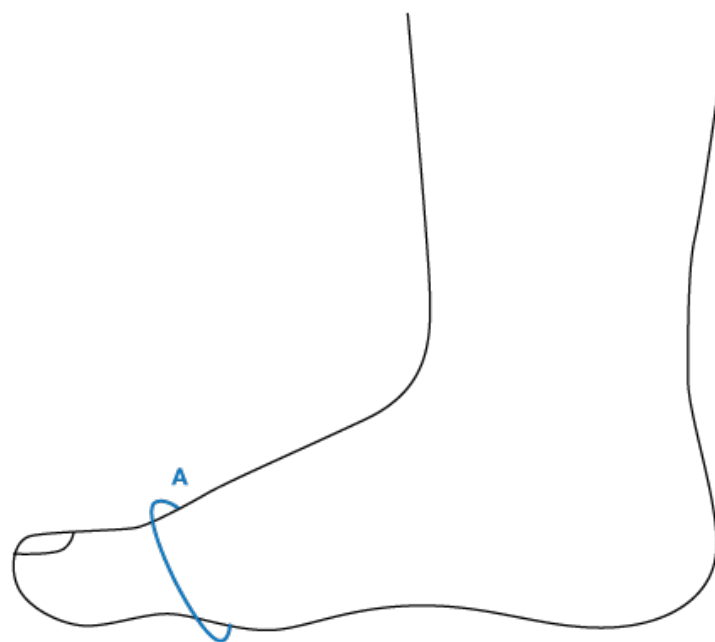

ความกว้างเท้าบริเวณโคนนิ้ว วัดเส้นรอบวงของเท้า โดยวัดรอบบริเวณฐานของนิ้วหัวแม่เท้า ไปยังฐานของนิ้วก้อย


จุดวัดตำแหน่ง

B

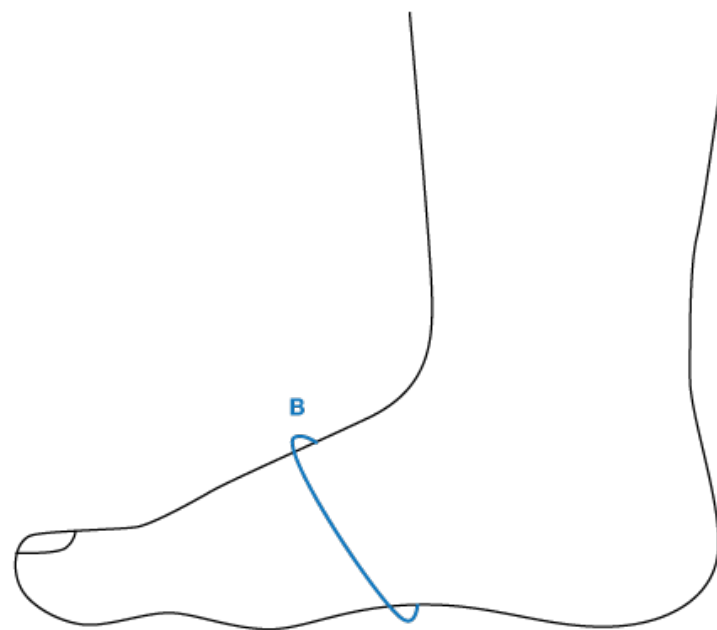


ความกว้างเท้าบริเวณกลางเท้า วัดเส้นรอบวงของเท้า โดยวัดรอบบริเวณกลางฝ่าเท้า

จุดวัดตำแหน่ง

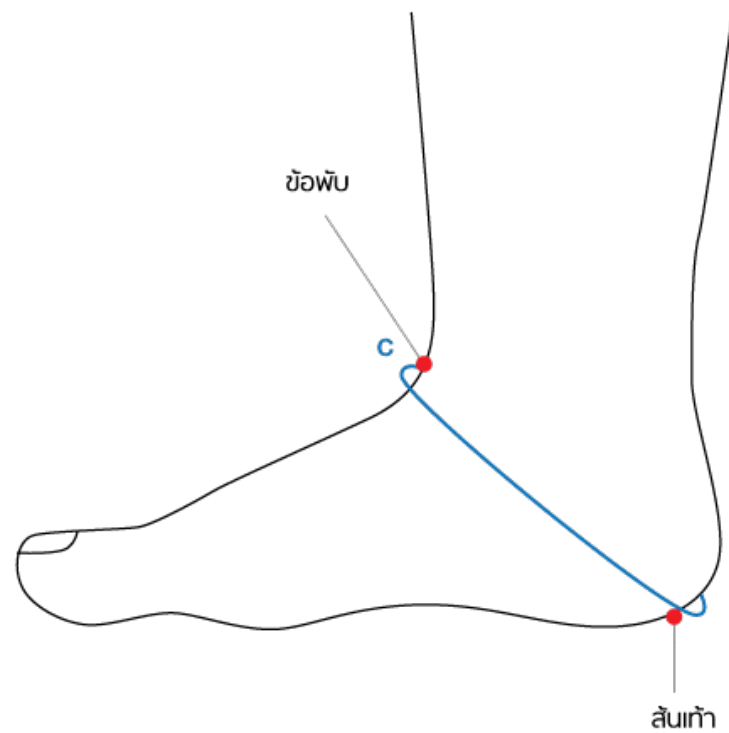

ความกว้างเท้าบริเวณส้นเท้า โดยวัดรอบบริเวณรอบวงส้นเท้าผ่านข้อพับ


จุดวัดตำแหน่ง

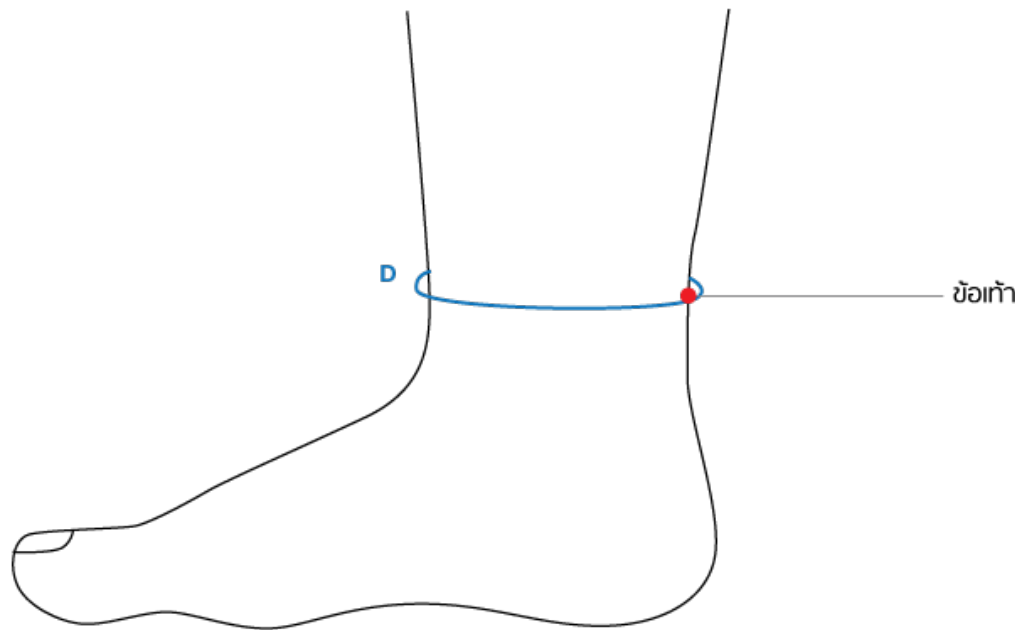

รอบข้อเท้า วัดข้อเท้าโดยรอบให้สายวัดอยู่เหนือตาตุ่ม

จุดวัดตำแหน่ง




E

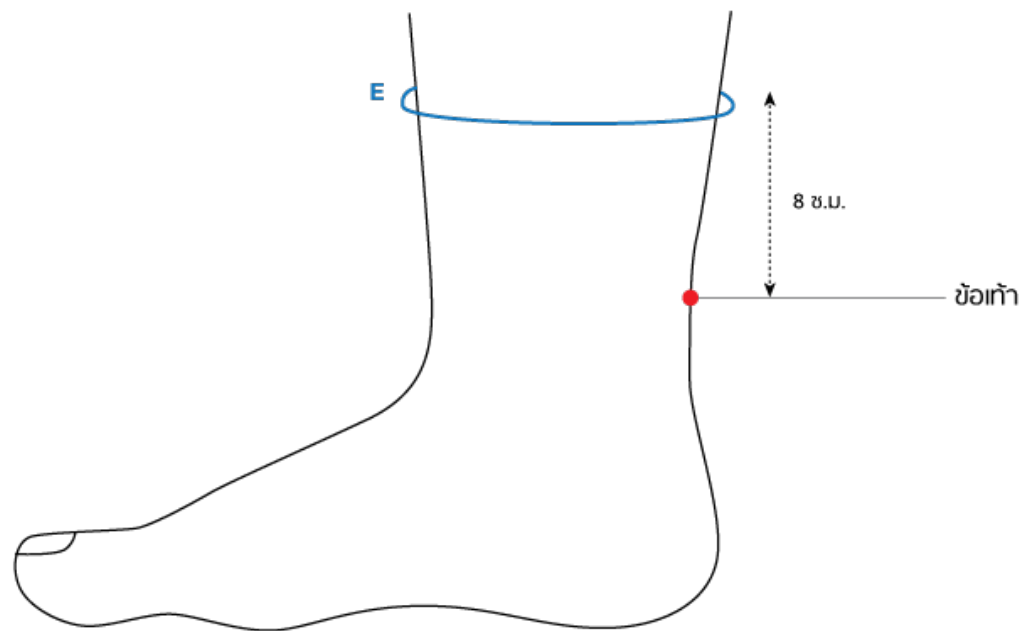

รอบข้อเท้า โดยวัดเหนือข้อเท้าขึ้นไป 8 ซม.แล้ววัดโดยรอบ

จุดวัดตำแหน่ง



F

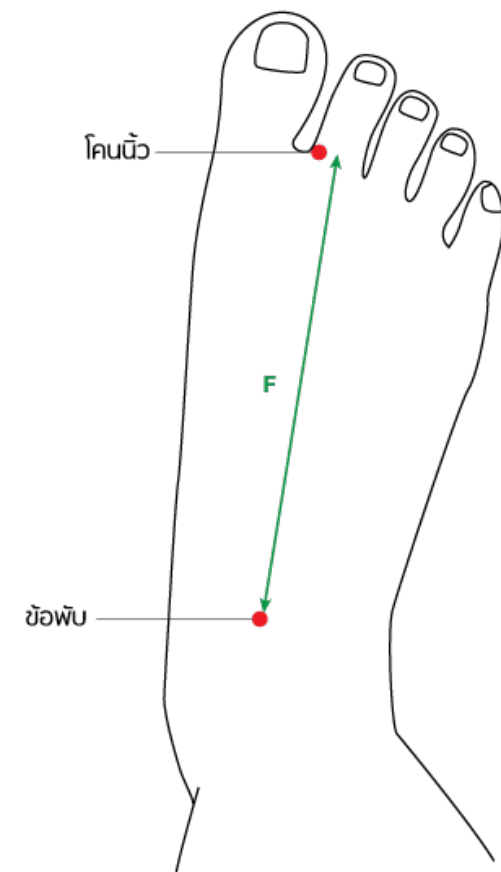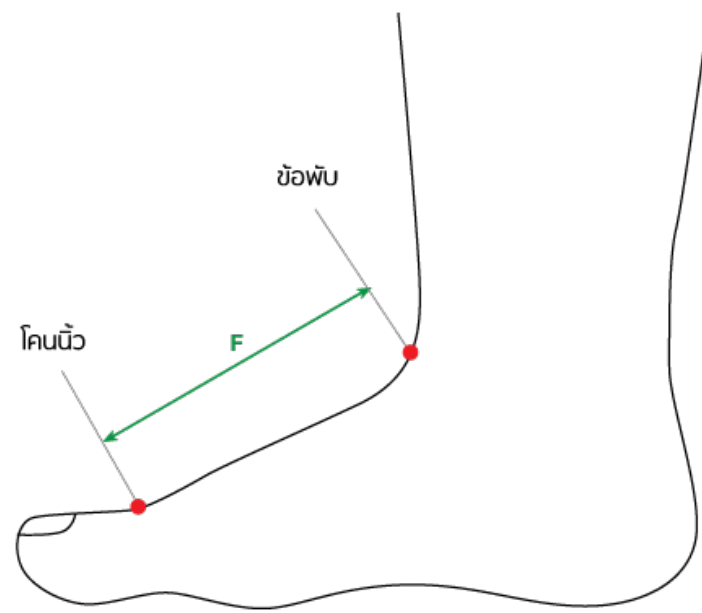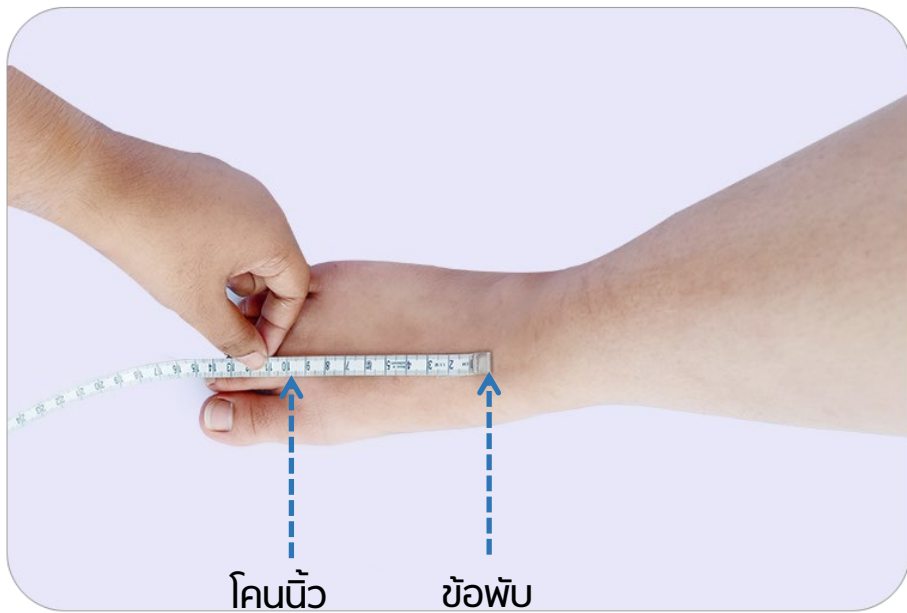

ความยาวหลังเท้า วัดความยาวจากโคนนิ้วถึงข้อพับ

จุดวัดตำแหน่ง


G

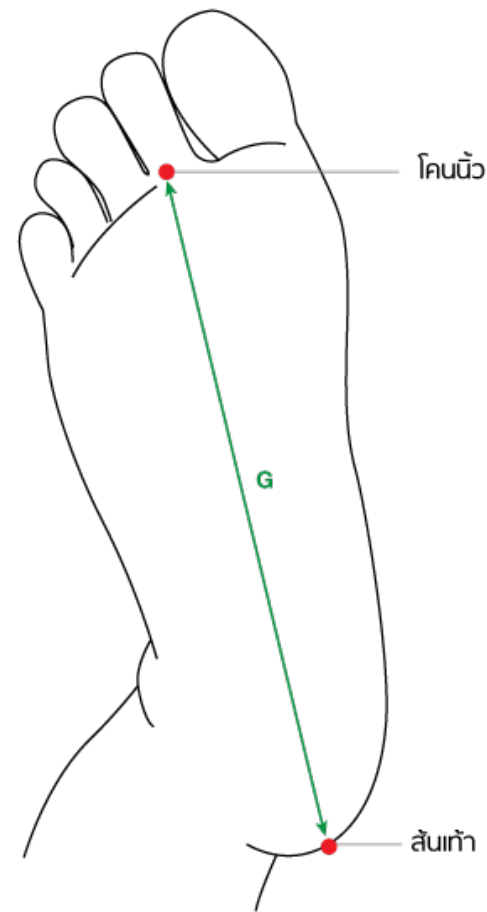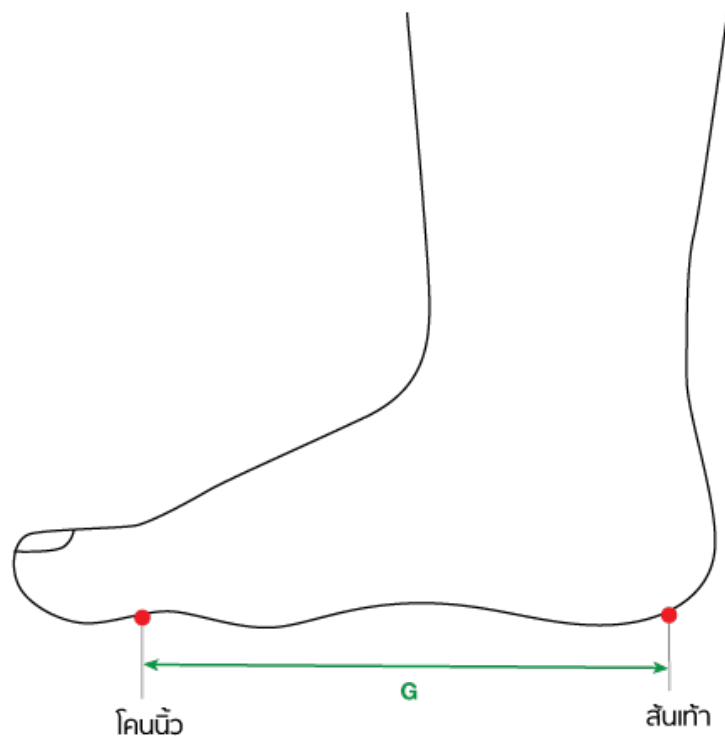

ความยาวฝ่าเท้า วัดความยาวจากโคนนิ้วถึงส้นเท้า

จุดวัดตำแหน่ง

H

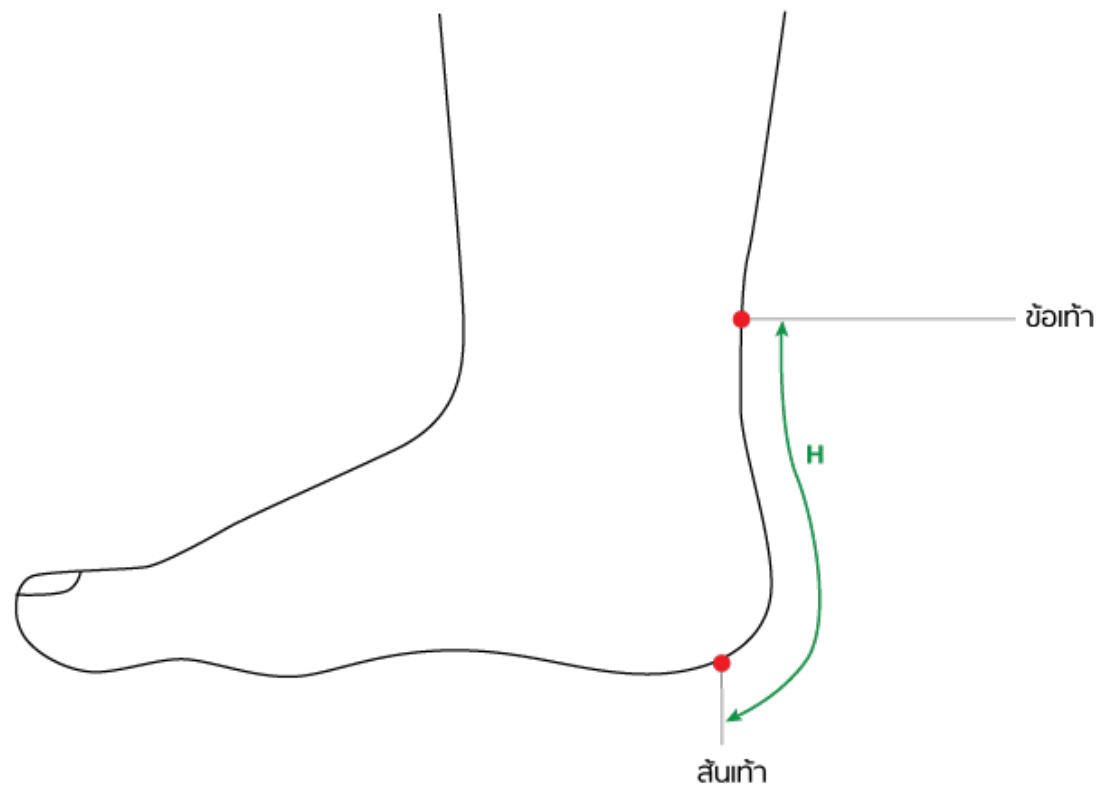

ความยาวส้นเท้า วัดความยาวจากส้นเท้าถึงข้อเท้า