

บริการสั่งตัด "ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล" และ "Pressure Garment"

# คู่มือการวัดขนาดสินค้า

กางเกงกระชับ สวมใส่หลังการรักษาแผล Burn เพื่อลดรอยกระชับแผลเป็นนูน

ผลิตภัณฑ์ Clinical Wear สวมใส่ภายหลังการรักษาแผล Burn จากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, โดนสารเคมีหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อลดกระชับ รอยแผลเป็นนูน (Keloid) เนื้อผ้ามีส่วนผสม Cotton ให้สัมผัสนุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวและช่วยระบายอากาศ, Spandex ให้แรงยึดหยุ่นกระชับ, Nylon ช่วยให้ซักทำความสะอาดง่ายและแห้งเร็ว



# บริการสั่งตัดสินค้าขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

Wacoal Body Clinic เราเข้าใจถึงสรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่สินค้าสำเร็จรูปได้ เรามีบริการสั่งตัด แบบพิเศษ ให้นขนาดไซส์สินค้าเข้ากับสรีระของคุณโดยเฉพาะ เราจะวัดขนาดรูปร่างของคุณ และสร้างแพทเทิร์นใหม่ เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระ ของคุณมากที่สุด

\* ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

## ขั้นตอนการรับบริการ



คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line

@bodyclinic



วัดตัวตามคู่มือ

กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม




สร้างแพทเทิร์น



ผลิตสินค้า

# ตำแหน่งจุดวัดทั้งหมด

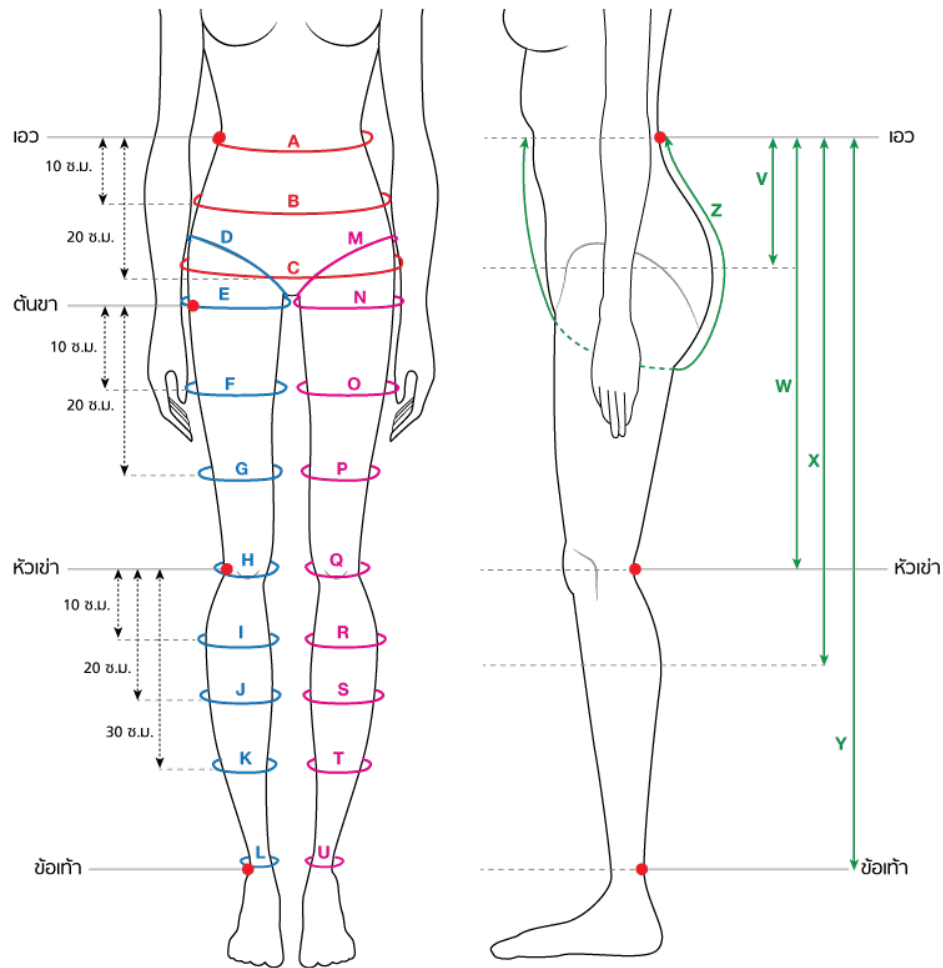

วัดตัวตามจุด **A - Z** (หน่วยเป็นซ.ม.)

## ข้อแนะนำ

วิธีการใช้สายวัด ควรวางสายวัด  
อยู่ระดับแนวตรงแนบกับสรีระ  
ไม่เอียง หรือ เหยียงและปรับสายวัด  
ให้แนบพอดีกับสรีระ ไม่รัดแน่น  
หรือหลวมเกินไป



**BODY CLINIC**  
Wacoal The expert in body solution

ศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic บริษัท ไรซาลตี้ จำกัด (มหาชน)  
132 ซ.เจริญกรุง 7 แขวงบางยี่สิบ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101 20  
โทรศัพท์: 0 2693 9494, 0 2269 3199 ต่อ 418 Line: @bodyclinic

**แบบฟอร์มการสั่งตัดสินค้า WACOAL BODY CLINIC**

โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

แพทย์  พยาบาล  ผู้ดูแล .....

**ข้อมูลส่วนบุคคล / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า**

ชื่อ..... นามสกุล..... เพศ  ชาย  หญิง อายุ.....ปี  
บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย..... อาคาร/หมู่บ้าน.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ / มือถือ.....

**ข้อมูลการสั่งตัดสินค้า** (สั่งตัด 3 ตัว)

สีผ้าสีสินค้า.....  สี NN (เนื้อ) จำนวน.....ตัว  
 สี BL (ดำ) จำนวน.....ตัว

**รูปแบบสินค้า**

ทางทรงกระชับ  แฟ้นกระชับคอ  
 กุดเท่าทรงกระชับ  เสื้อทรงกระชับ  
 กุดมือทรงกระชับ  หน้าทากทรงกระชับ  
 ธรรมดา  อื่นๆระบุ.....

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "คู่มือการสั่งตัดสินค้า" จากนั้น วัดตัวตามจุดที่กำหนด และกรอก  
ข้อมูลตัวเลขจุดวัดในตำแหน่งต่าง ๆ ลงแบบฟอร์ม

A .....ซ.ม.	K .....ซ.ม.	U .....ซ.ม.	AE .....ซ.ม.	AO .....ซ.ม.
B .....ซ.ม.	L .....ซ.ม.	V .....ซ.ม.	AF .....ซ.ม.	AP .....ซ.ม.
C .....ซ.ม.	M .....ซ.ม.	W .....ซ.ม.	AG .....ซ.ม.	AQ .....ซ.ม.
D .....ซ.ม.	N .....ซ.ม.	X .....ซ.ม.	AH .....ซ.ม.	AR .....ซ.ม.
E .....ซ.ม.	O .....ซ.ม.	Y .....ซ.ม.	AI .....ซ.ม.	AS .....ซ.ม.
F .....ซ.ม.	P .....ซ.ม.	Z .....ซ.ม.	AJ .....ซ.ม.	AT .....ซ.ม.
G .....ซ.ม.	Q .....ซ.ม.	AA .....ซ.ม.	AK .....ซ.ม.	AU .....ซ.ม.
H .....ซ.ม.	R .....ซ.ม.	AB .....ซ.ม.	AL .....ซ.ม.	AV .....ซ.ม.
I .....ซ.ม.	S .....ซ.ม.	AC .....ซ.ม.	AM .....ซ.ม.	AW .....ซ.ม.
J .....ซ.ม.	T .....ซ.ม.	AD .....ซ.ม.	AN .....ซ.ม.	AX .....ซ.ม.


สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่..... ผู้รับเรื่อง..... หมายเลข.....

กรอกข้อมูลจุดวัดทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม  
เลือกเมนู File และเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

# จุดวัดตำแหน่ง

A

นำเชือกมาผูกรอบเอว  
เพื่อกำหนดตำแหน่ง  
รอบเอว

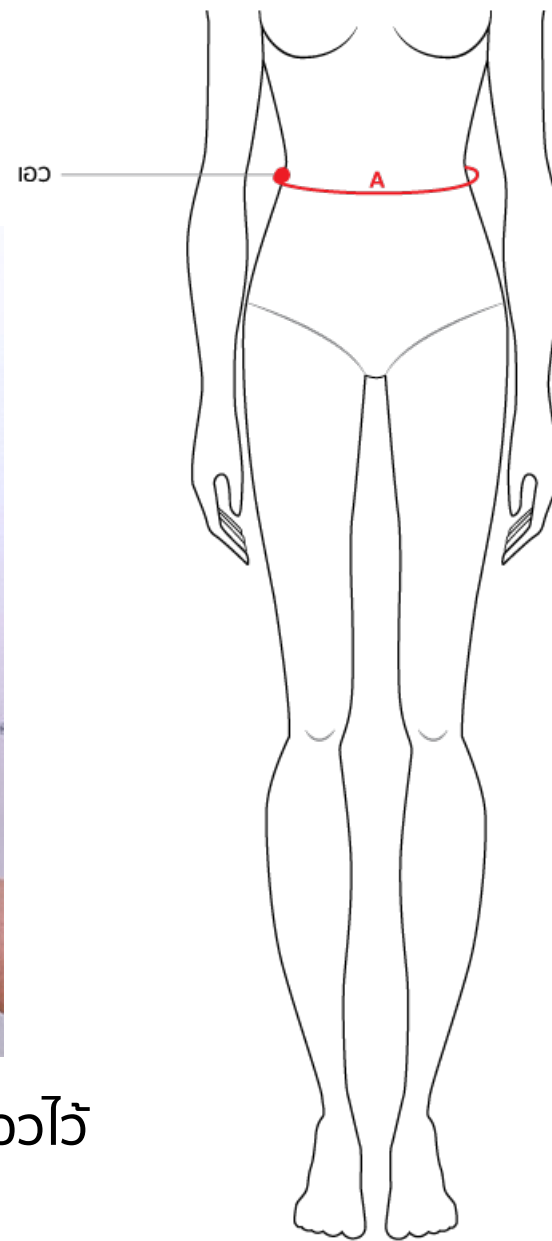


เอว วัดรอบเอวตำแหน่งเดียวกับเชือกที่ผูกเอวไว้

# จุดวัดตำแหน่ง

B




สะโพกบน

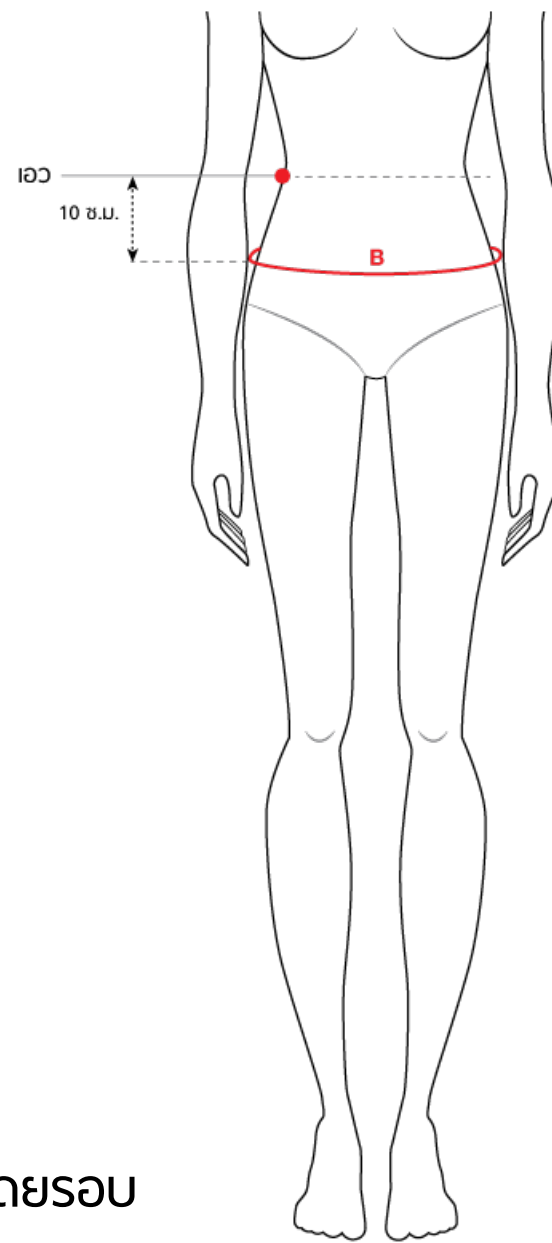

สะโพกบน ระยะห่างลงมาจากเอว 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

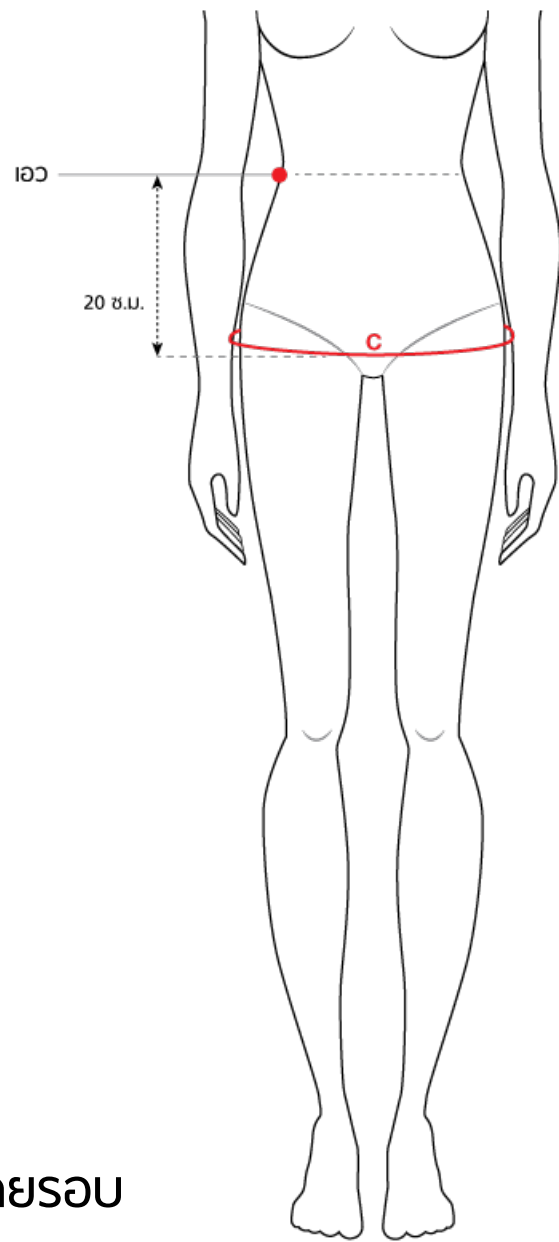

สะโพกล่าง ระยะห่างลงมาจากเอว 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง


D

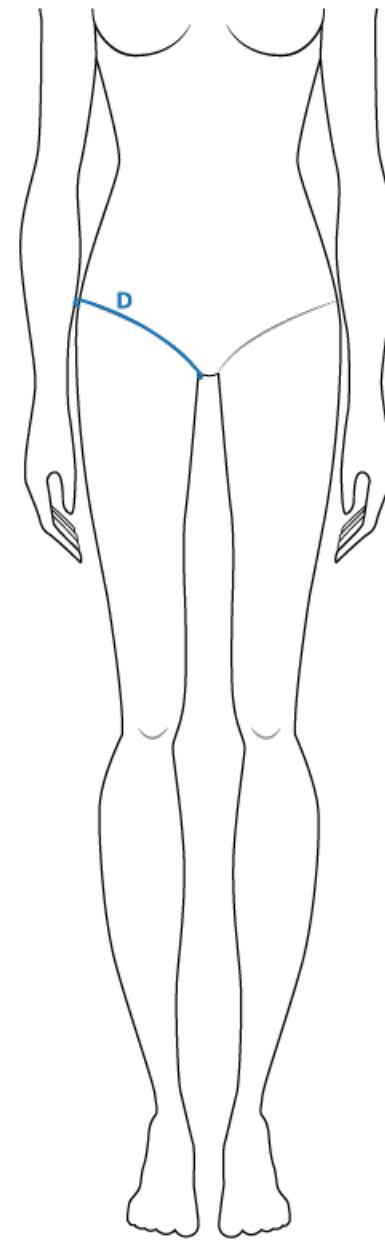

โคนขา (ข้างขวา) วัดโดยรอบโคนขา

# จุดวัดตำแหน่ง

E

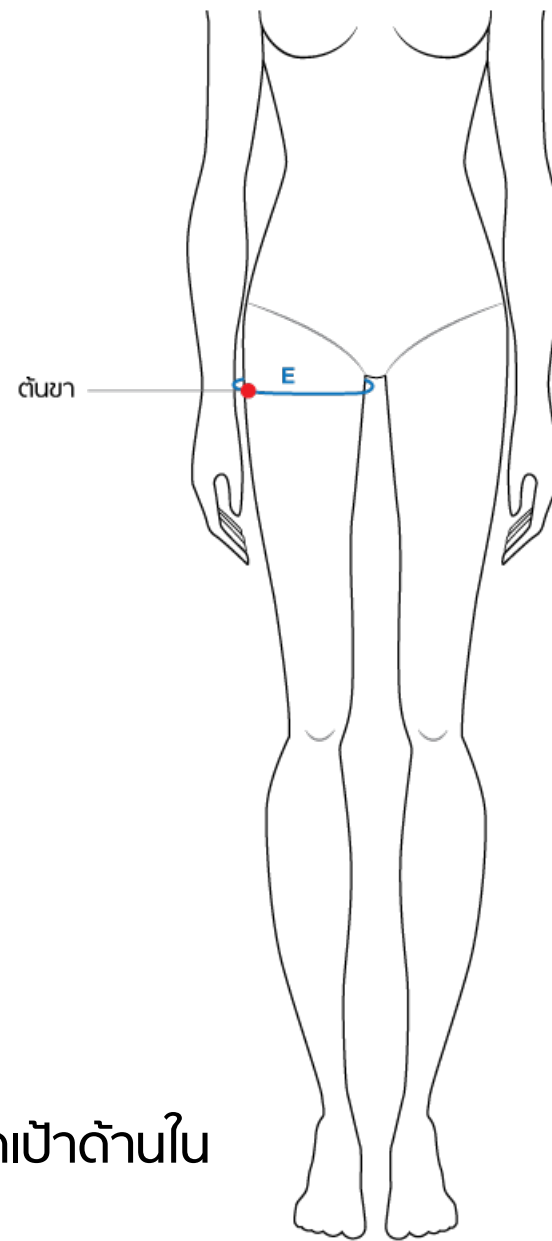


ต้นขาส่วนที่1 (ข้างขวา) วัดรอบต้นขา ให้สายวัดอยู่ชิดเป้าด้านใน



# จุดวัดตำแหน่ง


F

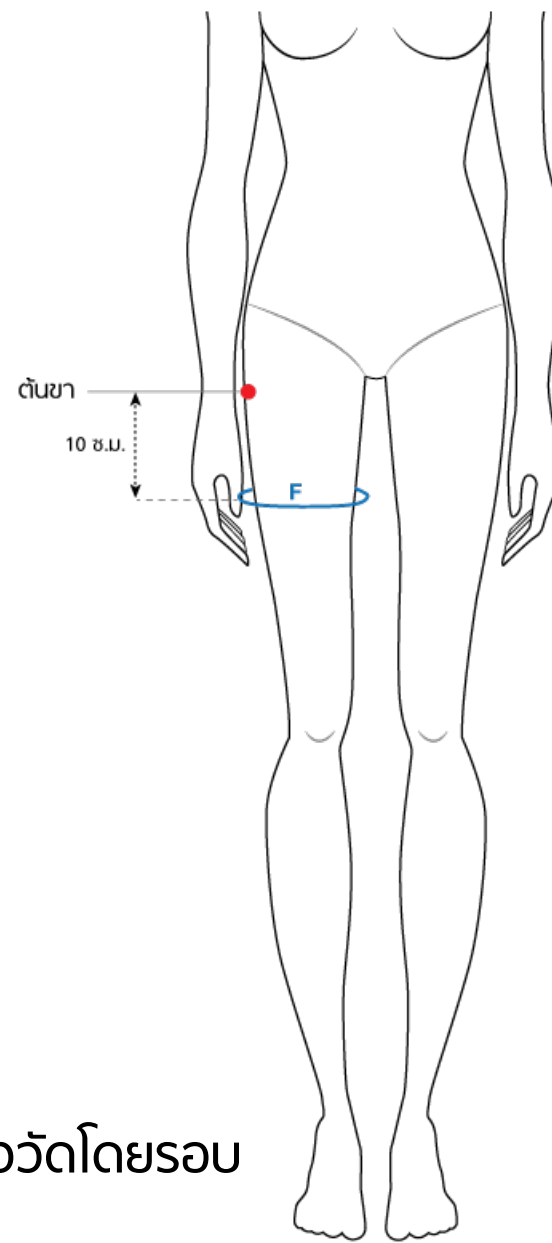

ต้นขา (ข้างขวา) ระยะห่างจากต้นขาลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

G

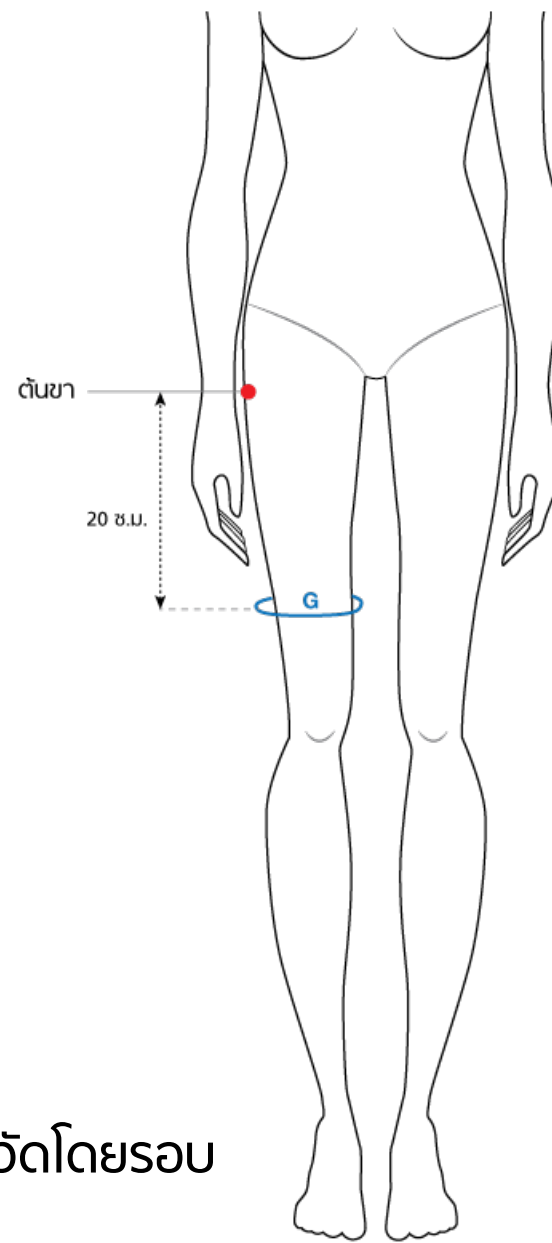

ต้นขา (ข้างขวา) ระยะห่างจากต้นขาลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

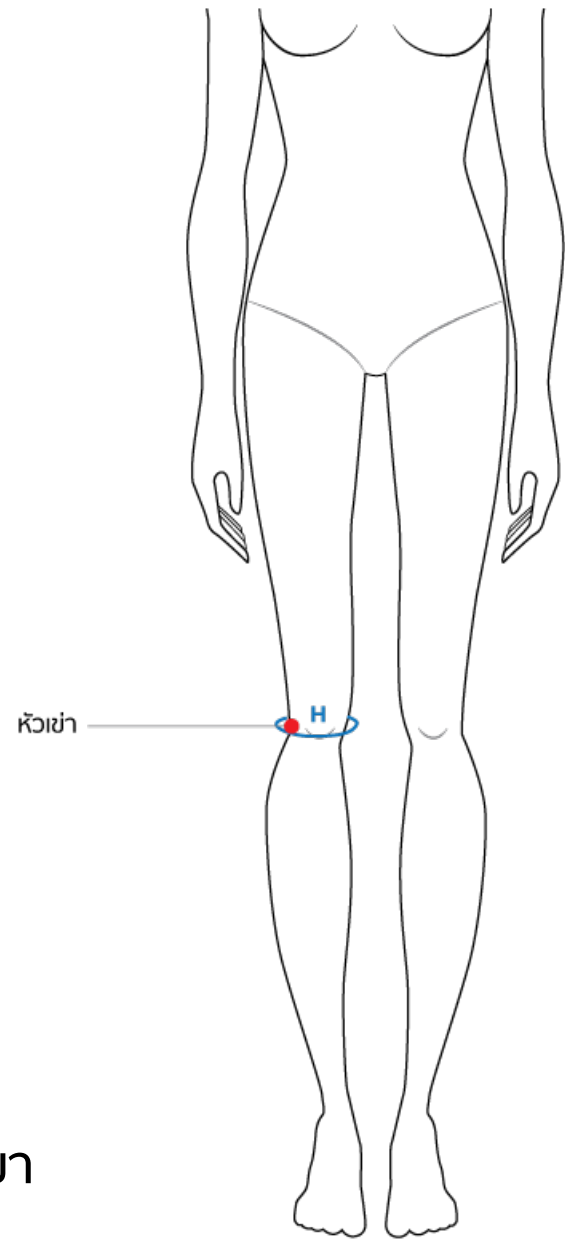

เข่า (ข้างขวา) วัดรอบเข่าผ่านข้อพับขา

# จุดวัดตำแหน่ง


I

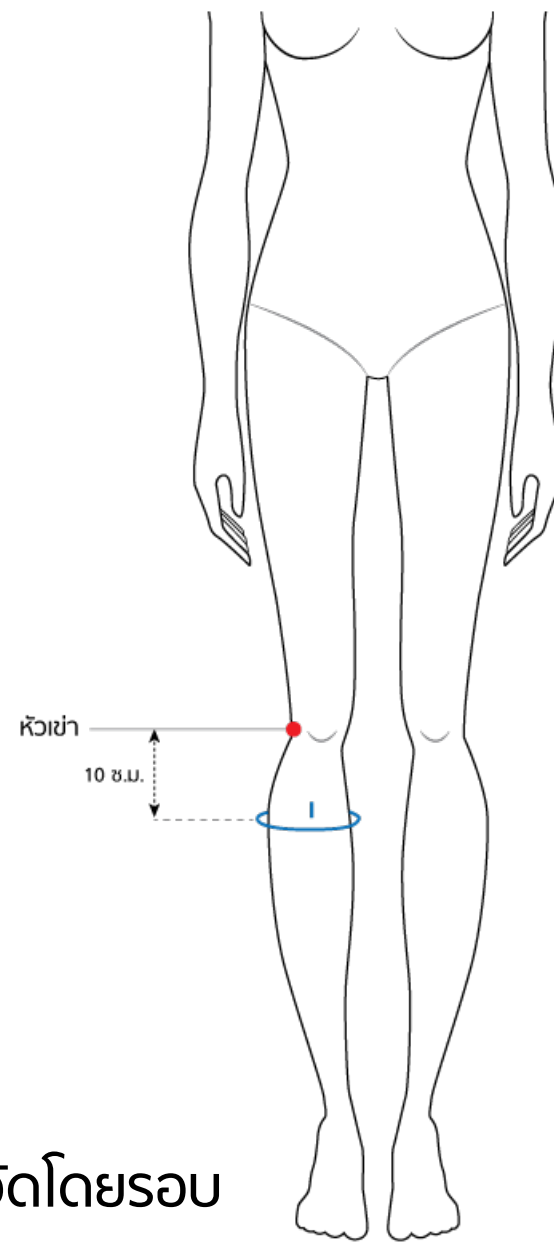

ใต้เข่า (ข้างขวา) ระยะห่างจากเข่าลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง


J

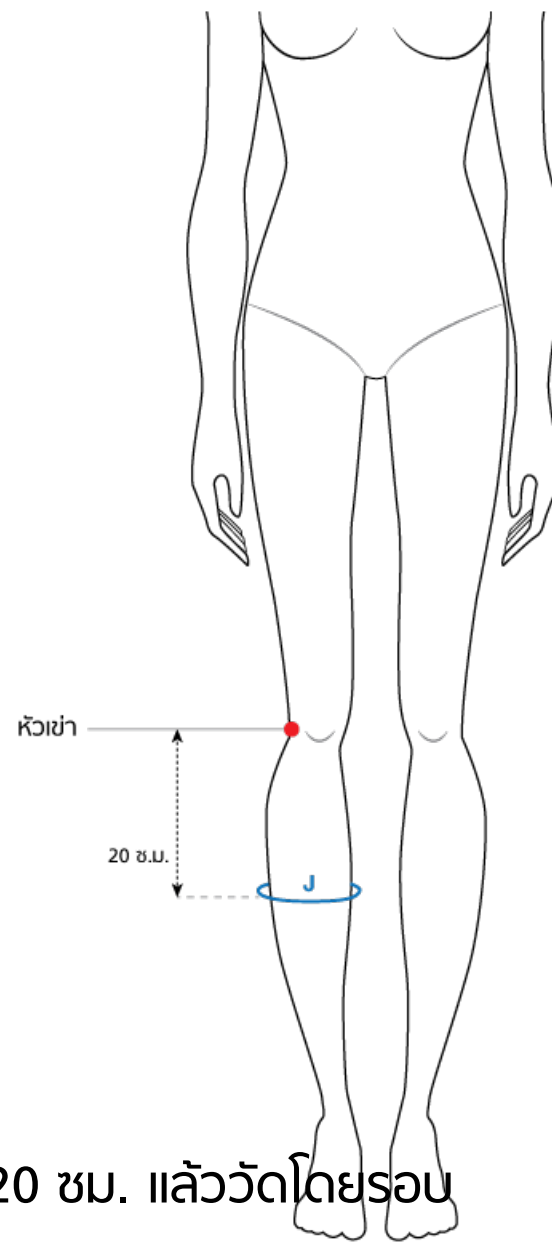

น่อง (ข้างขวา) จุดที่ใหญ่ที่สุดของน่อง หรือระยะห่างจากเข่าลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง

K

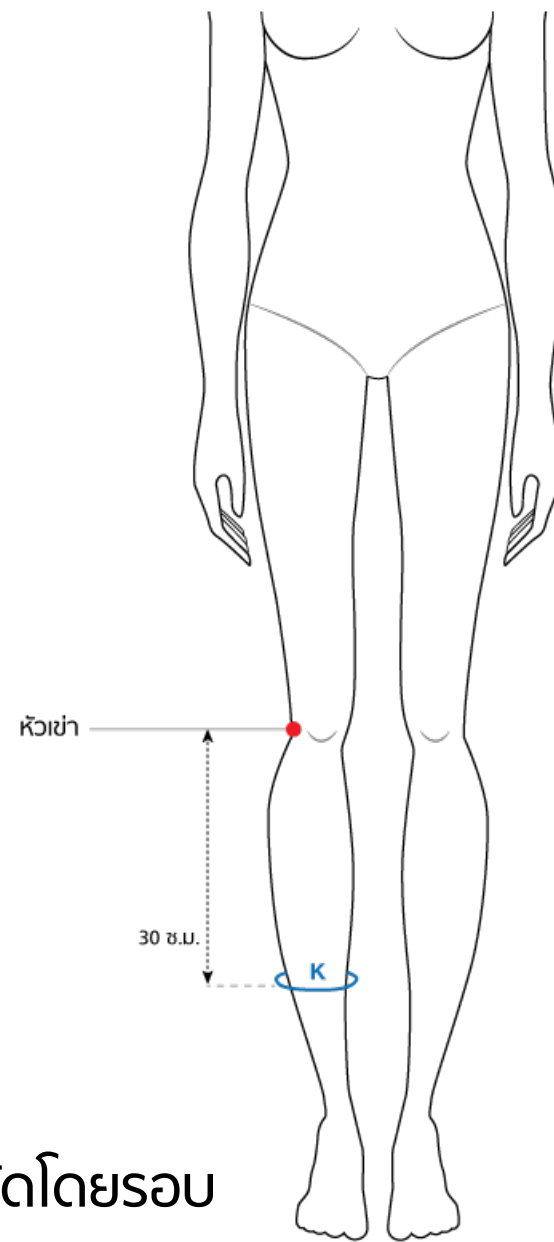

น่อง (ข้างขวา) ระยะห่างจากเข่าลงมา 30 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง



ข้อเท้า

ขาข้างขวา

ข้อเท้า (ข้างขวา) วัดรอบข้อเท้า

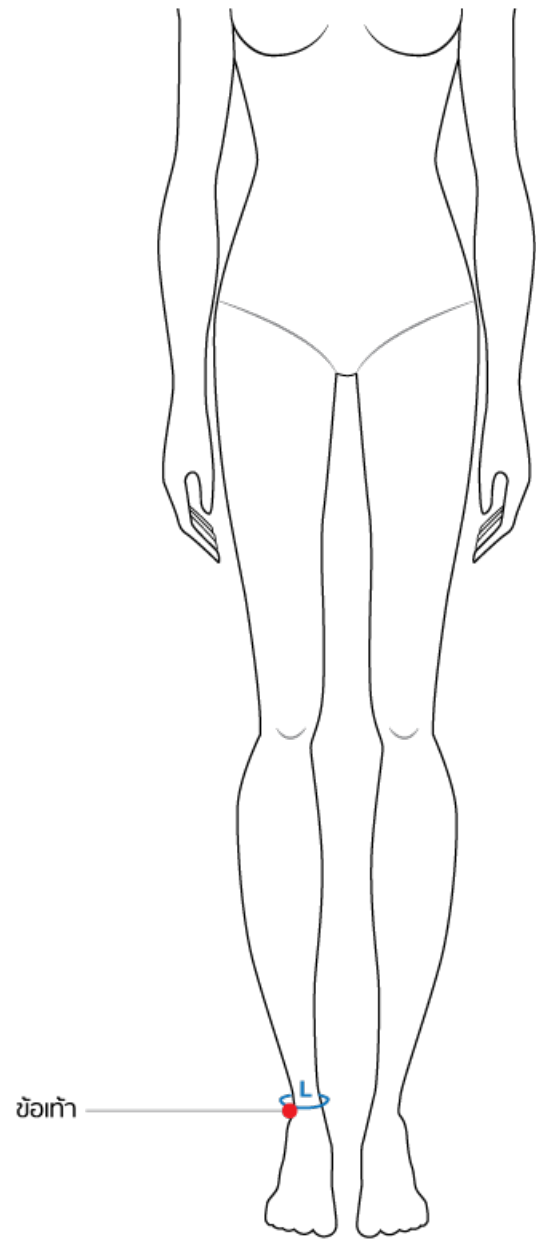

ข้อเท้า

# จุดวัดตำแหน่ง


M



ขาข้างซ้าย




โคนขา (ข้างซ้าย) วัดรอบโคนขา

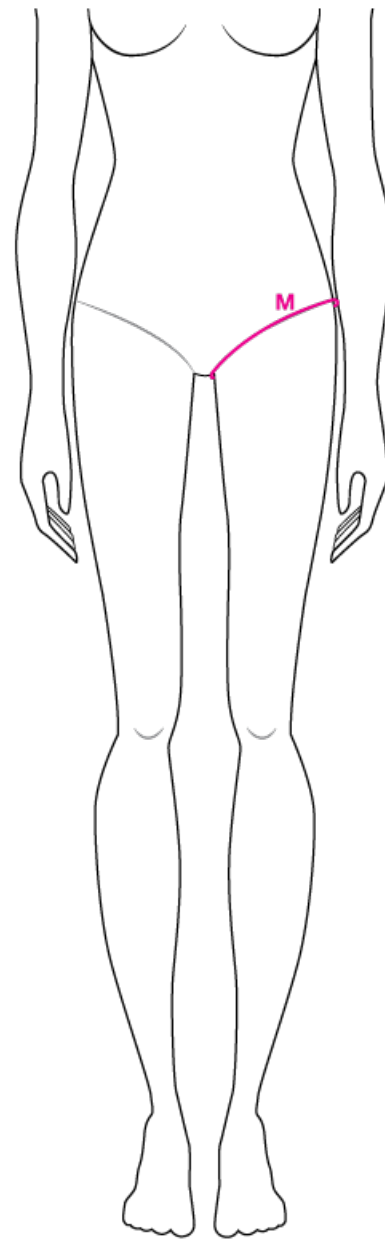




# จุดวัดตำแหน่ง

N

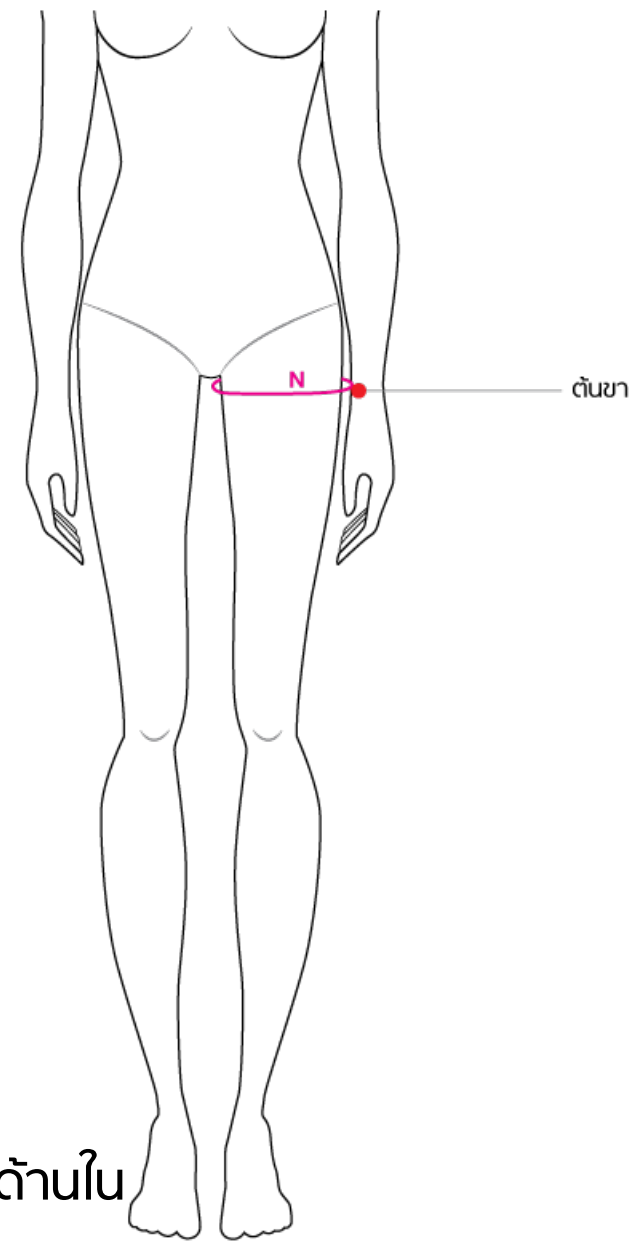

ต้นขาส่วนที่1 (ข้างซ้าย) วัดรอบต้นขา ให้สายวัดอยู่ชิดเป้าด้านใน


# จุดวัดตำแหน่ง

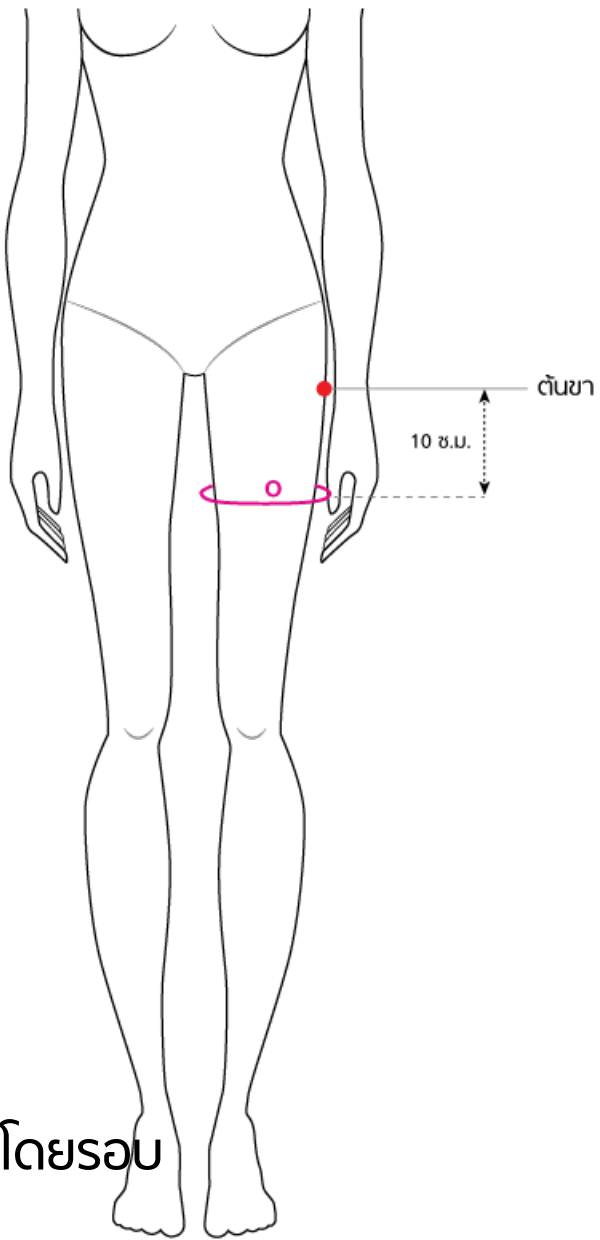

ต้นขา (ข้างซ้าย) ระยะห่างจากต้นขาลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

P

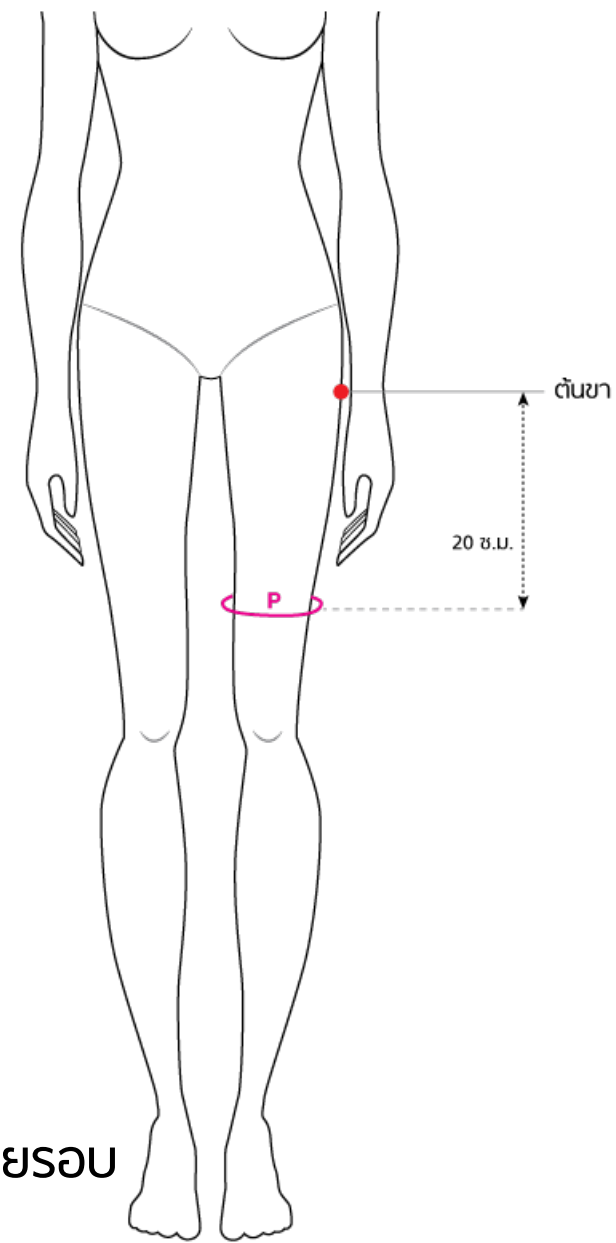

ต้นขา (ข้างซ้าย) ระยะห่างจากต้นขาลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

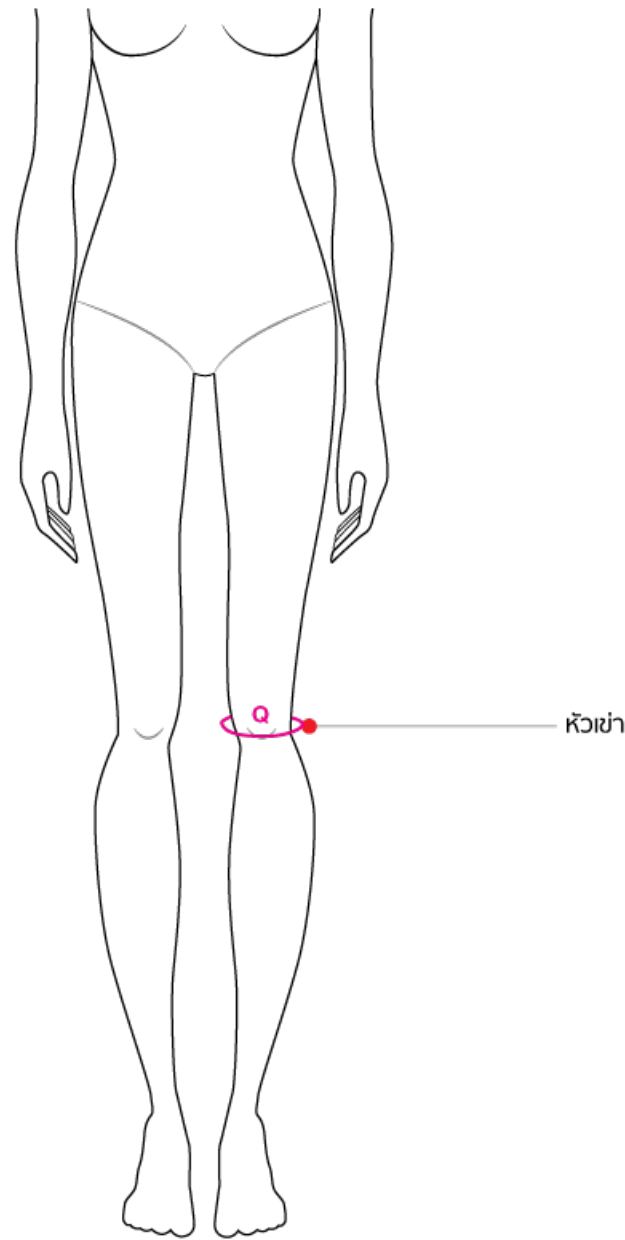

เข่า (ข้างซ้าย) วัดรอบเข่าผ่านข้อพับขา

# จุดวัดตำแหน่ง


R

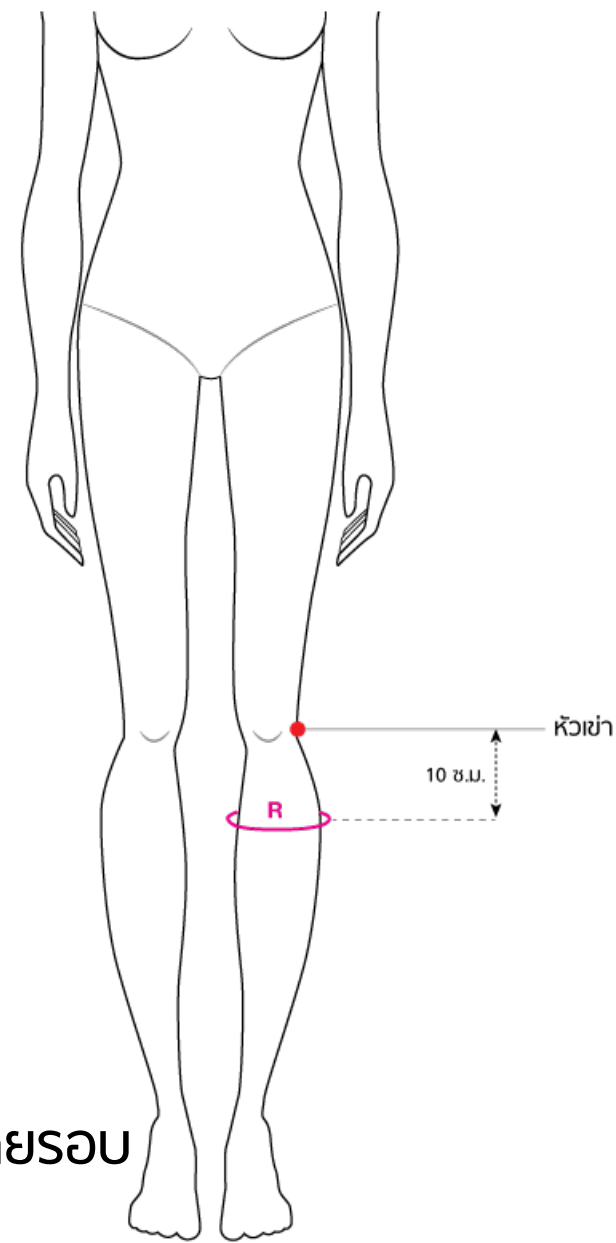

ใต้เข่า (ข้างซ้าย) หรือวัดระยะห่างจากเข่าลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

S

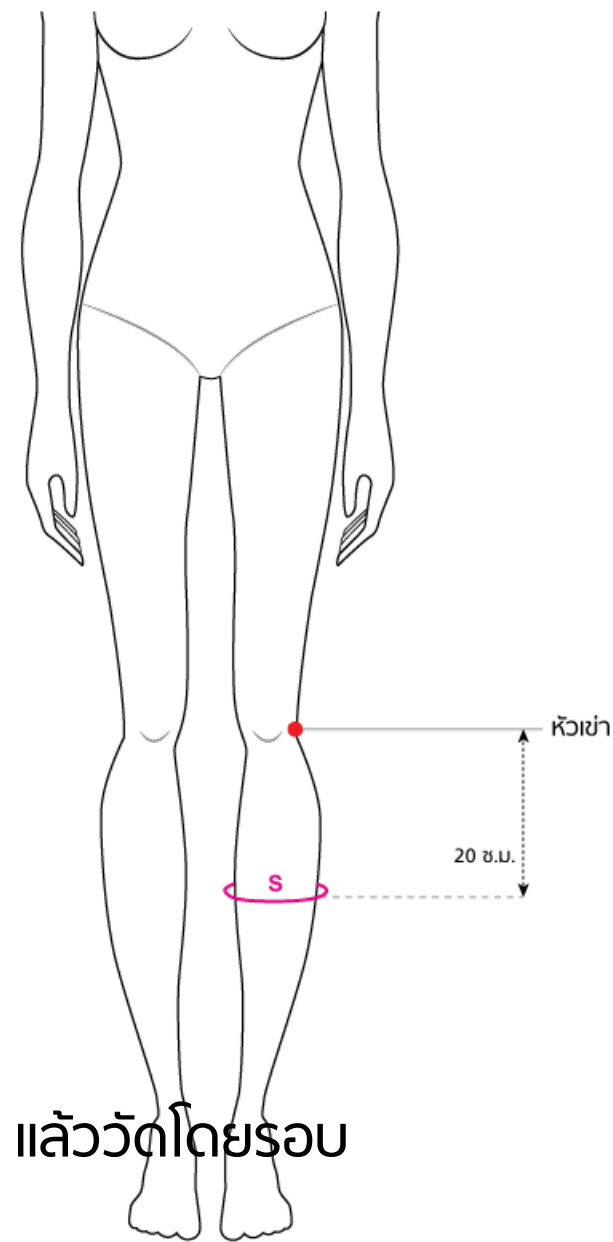

น่อง (ข้างซ้าย) จุดที่ใหญ่ที่สุดของน่อง หรือระยะห่างจากเข่าลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

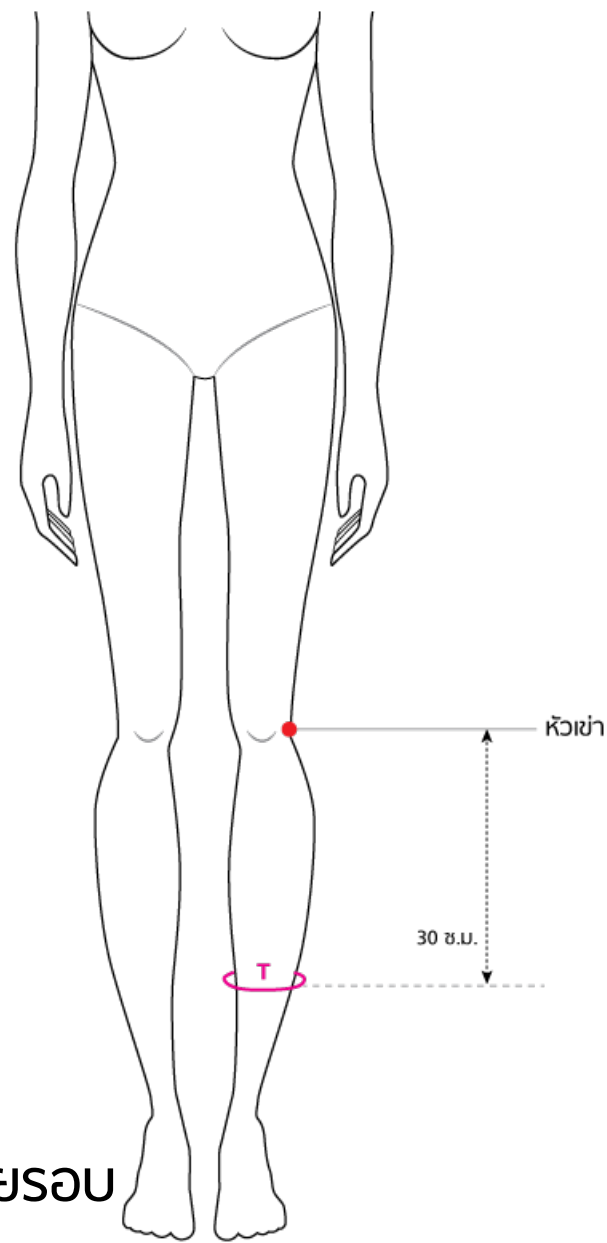

น่อง (ข้างซ้าย) ระยะห่างจากเข่าลงมา 30 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง

U

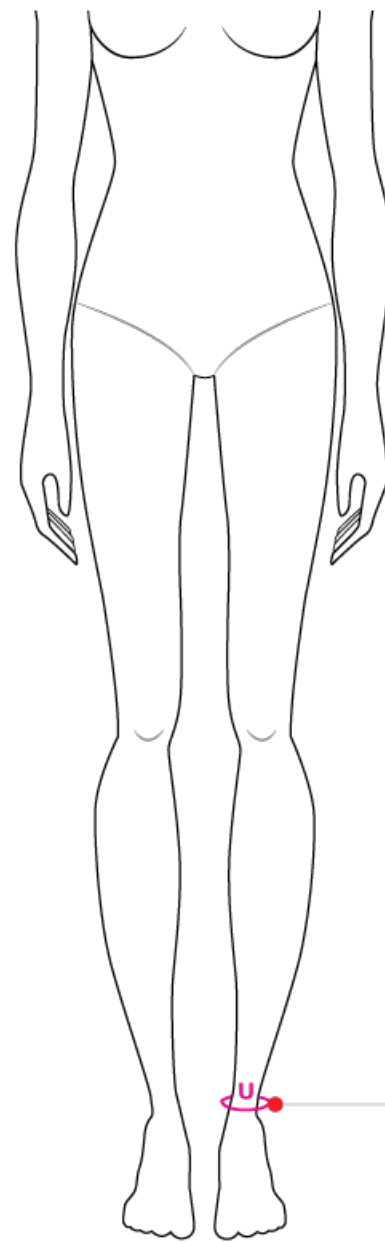

ข้อเท้า (ข้างซ้าย) วัดรอบข้อเท้า


ข้อเท้า



# จุดวัดตำแหน่ง V,W,X,Y

ยึดสายวัด ไว้ที่ตำแหน่งเอว จรดพื้น โดยไม่ต้องขยับสายวัด แล้วอ่านค่าตัวเลขที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- V : อ่านค่าจากเอวถึงสะโพกล่าง (จุดโค้งที่สุดของสะโพก)
- W : อ่านค่าจากเอวถึงหัวเข่า
- X : อ่านค่าจากเอวถึงน่อง (จุดที่ใหญ่ที่สุดของน่อง)
- Y : อ่านค่าจากเอวถึงข้อเท้า

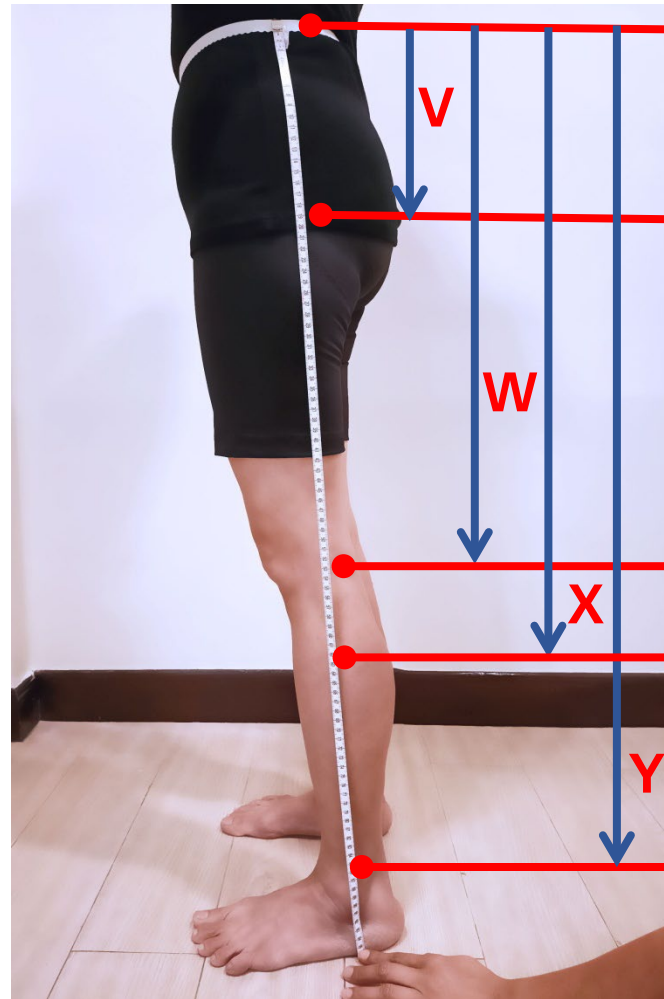


เอว

สะโพกล่าง  
(จุดโค้งที่สุด  
ของสะโพก)

เข่า

น่อง  
(จุดที่ใหญ่  
ที่สุดของน่อง)

ข้อเท้า

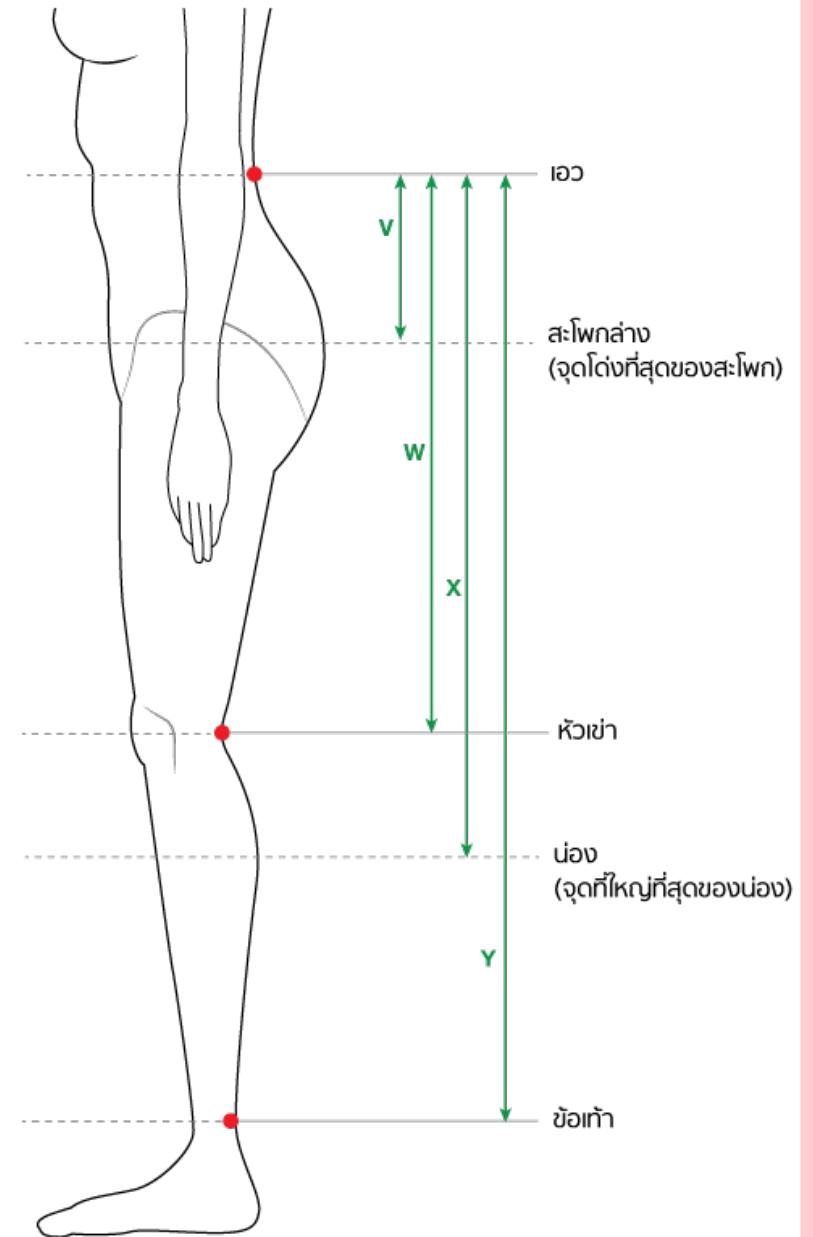

เอว

สะโพกล่าง  
(จุดโค้งที่สุดของสะโพก)


หัวเข่า

น่อง  
(จุดที่ใหญ่ที่สุดของน่อง)

ข้อเท้า

# จุดวัดตำแหน่ง

Z

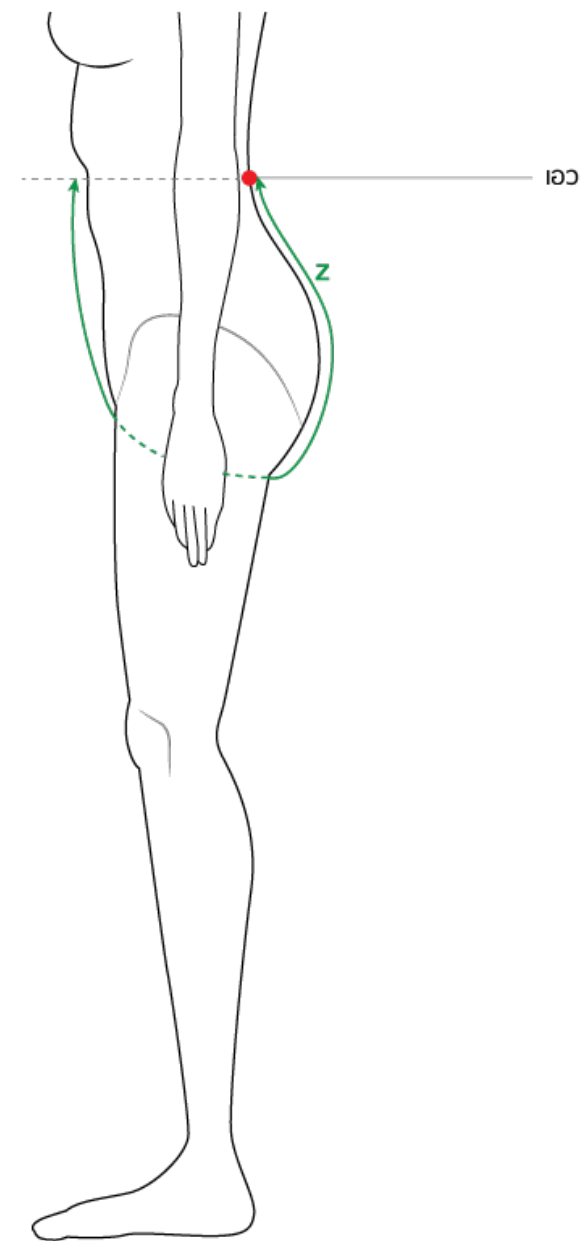

ความยาวเป้า วัดจากเอวด้านหน้าผ่านเป้าไปถึงเอวด้านหลังดังรูป

# หมายเหตุ

กรณี ต้องการสั่งตัดกางเกงกระชับ ที่มีความยาวกางเกงตามต้องการ

ลูกค้าสามารถปรึกษาคูกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line  
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการ กางเกงกระชับที่ยาวถึงข้อเท้า  
เราสามารถสั่งตัดกางเกงกระชับตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะ

กางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ขา 3 ส่วน) -----

กางเกงขายาวคลุมเข่า (ขา 5 ส่วน) -----

กางเกงขายาวถึงข้อเท้า (ขา 9 ส่วน) -----

